


Kühlfalle

Kühlfalle, -40 / -80°C, 2 Glaskühlfallen inklusive



IQ | OQ
verfügbar
Details auf Seite 12

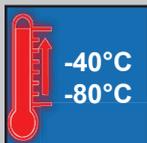

WCT-40 mit 2 Glaskühlfallen (inklusive)

WCT Kühlfalle, -40/-80°C

Geeignet für:

- Aufnahme von Verdunstungsdämpfen oder gefährlichen Dämpfen aus Vakuumleitungen

Technische Merkmale:

- Bad aus Edelstahl
- pulverbeschichteter Stahl, doppelt lackiert und eingebrannt, 20 mm Polyurethan-Isolierung
- digitaler Timer: Steuerung von Einschaltverzögerung und Betriebszeit
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur
- mit Ablaufventil
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Spermodus
- Überlastungsschutz
- Sensor-Fehlermeldung und Fehlerstromschutzschalter

Steuerung:

- Digitale PID Steuerung mit **Jog-Shuttle-Schalter** (Drehen + Drücken)

Modell	WCT-40	WCT-80
Kapazität	10 l	
Temperaturbereich	-20°C bis zu -40°C	-65°C bis zu -80°C
Art der Kühlfalle	2 Kühlfallen aus Glas	
Kühlgerät	370 W	750 W
Kühlmittel	R-404A	H-FKW
Maße innen (B x T x H, mm)	220 x 220 x 210 mm	
Maße außen (B x T x H, mm)	377 x 453 x 705 mm	
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	560 x 550 x 1010 mm, 67 kg	680 x 640 x 1130 mm, 90 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	DH.WCT00140	DH.WCT00180
Bestellnummer 120V	DH.WCT00240	DH.WCT00280

Hinweis: Es wird empfohlen Ethanol als Kühlmittel zu verwenden, da andere Kühlmittel Schäden an Bauteilen verursachen können.

Zubehör:



Ersatzkühlfalle aus Glas für WCT

Maße	Artikel	Bestellnummer
Ø106 x h249 mm, 1,5 bar druckfest bei 250°C, Borosilikatglas 3.3	CTG1000	DH.WCT11000

Fragen Sie auch nach Spezialanfertigungen!