

Pipettierhilfe



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- hochwertiger Pipettierhelfer, bestes Preis-Leistung-Verhältnis
- hochpräziser, langlebiger Motor
- individuelle Einstellung der Geschwindigkeit beim Füllen und Entleeren der Pipette
- drei Pipettiergeschwindigkeiten zur Auswahl:
(F) schnell = 10 ml/s
(M) mittel = 5 ml/s
(S) langsam = 1 ml/s
- „freier Ablauf“ (G) wählbar für eine Entleerung vollkommen ohne Motor
- handlich und leicht im Gewicht für ermüdungsfreies Pipettieren
- fester Sitz aller Pipettenarten
- Pipettenhalterung mit austauschbarem Filter & Silikonadapter
- Pipettenhalterung autoklavierbar bei 121°C
- praktischer Ständer für das sichere Abstellen des Gerätes samt Pipette
- inklusive Wandhalterung
- NiMH 8,4V 200mAh Batterie
- CE-Markierung

WITOPED XP Professional

Typ	Bestellnummer
220 V	5 380 001
120 V	5 380 002


Lieferumfang

WITOPED XP, Ladegerät, Ersatzfilter, Tischständer, Bedienungsanleitung



Ersatzfilter

Verpackungseinheit	Bestellnummer
5	5 380 006

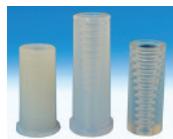

Ersatzsilikonadapter

Bestellnummer
5 380 004

Preiswerte elektrische Pipettierhilfe

WITOPED eco ist eine preiswerte elektrische Pipettierhilfe, geeignet für alle Pipetten bis zu 100 ml.

Digitale Anzeige und Geschwindigkeitseinstellung

Der Ladestand der Batterie und die eingestellte Geschwindigkeit werden digital angezeigt. Die Pipettiergeschwindigkeit kann mit Hilfe der "+/-" Tasten angepasst werden.

Pipettenhalterung

Die Halterung ist für alle Pipettenarten geeignet. Im Falle einer Kontamination lässt sich die Halterung leicht entfernen, um den Filter sowie den Silikonadapter auszutauschen.

Bedienknöpfe

Der obere Knopf wird gedrückt, um die Pipette zu füllen, der untere Knopf wird gedrückt, um die Pipette zu entleeren. Die Geschwindigkeit beider Bedienknöpfe kann feineingestellt werden.

Motor

Der kraftvolle Motor ist schnell und zuverlässig.

