



RT-10 mit Scheibe WRT120

RT-10⁵ - 60 U/Min, 0 - 90° Winkel

Geegnet für:

- allgemeines Mischen, Diffusion, Dialyse, Hybridisierung und Belüftung von Kulturen
- Aufbewahren biologischer Proben in Suspension

Technische Merkmale:

- 5 - 60 U/Min
- Winkel auf 0-90° einstellbar
- digitales LCD-Display
- sanftes Anlaufen und Ändern der Rotationsgeschwindigkeit während des Betriebs
- Timer für 0-60Min.
- 5 verschiedene Scheiben verfügbar
- lange Lebensdauer dank stabiler Konstruktion
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Timer 59 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
- LED-Betriebsanzeige
- Überlastungsschutz
- Spermodus

Steuerung:

- programmierbare **Jog-Shuttle-Steuerung** mit Bedienknopf

Modell	RT-10
Design	Drehbewegung
Geschwindigkeitsbereich	5-60 U/Min
Winkel	0-90°
Programme	6 Programme, 10 Stufen
Timer & Alarm	99hr 59Min., Fehlermeldung, Timerende
Display	digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Steuerung	digitale Feedbacksteuerung (Jog-Shuttle)
Temperaturbeständigkeit	weniger als 65°C (trockene Luft)
Sicherheitsvorrichtung	Überlastungsschutz
Maße & Gewicht	200x250xh260 mm, 6 kg
Verpackungsgröße	370x240xh430 mm, 8,5 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz
Bestellnummer 230V	DH.WRT00010
Bestellnummer 120V	DH.WRT00020

Achtung: Scheiben nicht inklusive - bitte separat bestellen!

Lieferumfang:


- Rotator RT-10
- 4x kurze, 4x lange Abstandshalter WRT300



4x kurze, 4x lange Abstandshalter zum Verbinden von Scheiben (in Lieferumfang enthalten)


Artikel	Bestellnummer
WRT300	DH.WRT00300

Zubehör:

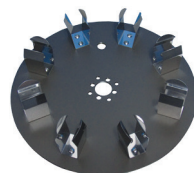


Rotatorscheibe für konische Gefäße 8 x 50ml

Artikel	Bestellnummer
WRT100	DH.WRT00100

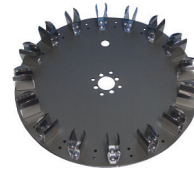

Rotatorscheibe für konische Gefäße 16x 15ml

Artikel	Bestellnummer
WRT110	DH.WRT00110

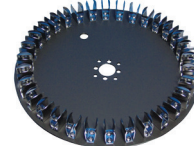

Rotatorscheibe für konische / Zentrifugen-gefäße 32x 1,5ml

Artikel	Bestellnummer
WRT120	DH.WRT00120



Rotatorscheibe für konische / Zentrifugen-gefäße 60x 1,5ml

Artikel	Bestellnummer
WRT130	DH.WRT00130



Rotatorscheibe für 4x 250ml Kolben

Artikel	Bestellnummer
WRT140	DH.WRT00140